

MASQUE DE PROCÉDURE

- Stérilisé
- Jetable
- 3 épaisseurs

NIVEAU 1
BLEU



GRANDEUR :

17 cm x 9.5 cm (6.7 po x 3.7 po) – 3 plis

UTILISATION :

Idéal où il y a présence d'une faible quantité de liquide, d'éclaboussures ou de jets d'aérosol.


STRUCTURE ET COMPOSITION :

Fait de textile non tissé (couches intérieure et extérieure SBPP) et de tissu filtrant (couche du milieu MBPP)

NORME DE PRODUIT :

EN14683-2019 (conforme à la norme ASTM Niveau 1)

MASQUE MÉDICAL DE PROCÉDURE NIVEAU 1

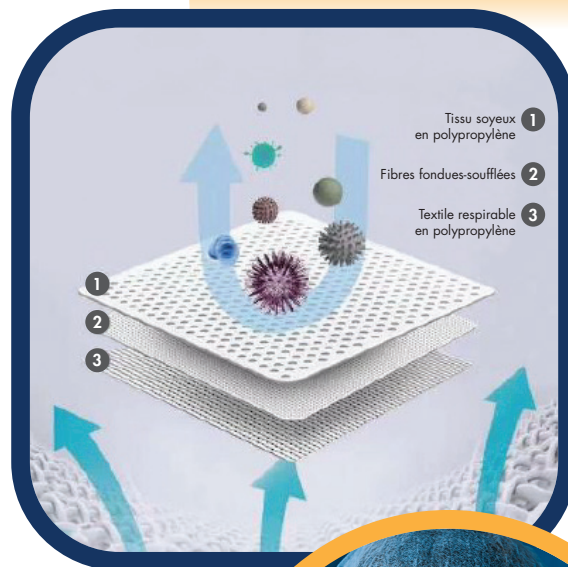

PRÉCISIONS

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI)

- Le prix est à l'unité
- Vendu en caisse (40 boîtes de 50 masques chacune)
- Chaque boîte contient 5 sachets de 10 masques stérilisés
- Quantité commandée en lot de 2 000 unités
- 100% du paiement à l'expédition
- Livraison terrestre régulière incluse

Pour de l'information sur les prix, veuillez consulter le formulaire de commande en ligne au www.amylior.com

Résistance aux fluides	80 mmHg
Efficacité de filtration des particules	PFE ≥ 95%
Efficacité de filtration bactérienne	BFE ≥ 95%
Respirabilité Delta P	< 4.0 H ₂ O/cm ²
Inflammabilité	Classe 1